


Aspirateur électrique portable ASKIR-C30, 2 000 ml

Réf. SOC-310100-03



- Compacte et facilement transportable (portable)
- Petite unité électrique sur batterie
- Aspiration maximale 30 L/min
- Filtre antibactérien
- Bouton de régulation du flux et vacuomètre
- Coque ABS facilement lavable
- Fonctionne en continu sur du 230 V ~ 50Hz. Batterie 12 V avec recharge sur secteur
- Compatible avec tout type de sonde et connexion
- Utilisé pour les aspirations par voies nasales, trachéales, buccales chez adultes et enfants

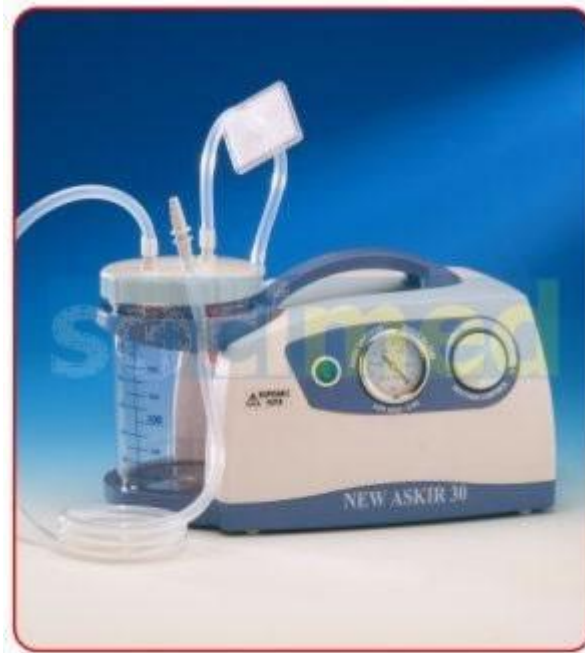

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Grâce à ses caractéristiques, il est adapté pour une utilisation sur patients trachéotomisés, en cas d'opération mini-invasive, et des soins post-opératoires à domicile
- Manomètre de contrôle, molette de réglage de l'intensité d'aspiration, 1 seul bouton de mise en marche
- Bocal autoclavable 2000 ml en polycarbonate
- Fait de matière plastique, fortement résistante à la chaleur, et électriquement isolée conformément aux dernières normes de la communauté européenne.

Spécifications techniques :

- Débit : 40 l/min
- Puissance : 107 VA
- Dépression maximale : -0.80 bar -80kPa -600mmHg.
- Flacon de 2000 ml
- Cons. : 140 W.
- Autonomie des batteries : 45 min
- Temps de recharge : 120 à 150 min
- Poids : 3,6 kg
- Dimensions : 35 x 21 x 18 cm
- Diamètre cordon : 8-9-10 mm
- Normes CEI 62/5 - IEC /601



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration